

Catálogo de productos

Ancla para Sutura HEALICOIL

# de Referencia	Descripción
72203379	HEALICOIL PK anclaje de 5,5 mm con dos suturas (Azul y Cobraid Azul)

Accesorios

72203336	Punzón – Dilatador, uso con anclajes de 5,5 mm.
72203483	Broca 4,5 mm, para uso con anclaje de 5,5 mm. Preparación de orificio en hueso duro

Material exclusivo para médicos especialistas
Reg. San.: INVIMA 2009DM-0004255

Smith&Nephew Colombia SAS
Calle 100 N° 7-33 Torre 1 Piso 3, Bogotá
Tel: 57 (1) 605 7373
www.smith-nephew.com



HEALICOIL[◇] PK

Ancla Manguito Rotador

Arquitectura abierta,
posibilidades abiertas

Hacer más de sus reparaciones del manguito rotador, con menos material.¹

Revolucionando la reparación del manguito rotador con un diseño de arquitectura abierta

El Ancla HEALICOIL[®] PK se diferencia de los implantes de núcleo sólido convencionales al eliminar el material en el diámetro interior. Esto permite que el hueso se una por dentro del perfil de la rosca del ancla, proporcionando una excelente seguridad de fijación.² Incluso con un volumen reducido de material, esta ancla proporciona un nivel superior de rendimiento biomecánico en el cual los cirujanos pueden tener confianza real.³

Menos material

- Diseño único de arquitectura abierta que reduce el material que queda en el hombro, en comparación con anclas convencionales o con núcleo sólido. Esto es una ventaja en las reconstrucciones de doble fila del manguito rotador, donde se utilizan varias anclas.

Resistencia superior a la extracción

- Diseño de ancla totalmente roscado y extendido que proporciona significativamente más unión que las principales anclas en el mercado, otorgando una mayor resistencia a la extracción en huesos de mala calidad o osteoporóticos.



Alta resistencia a la torsión durante la inserción

- El Insertador HEALICOIL[®] involucra 100% de la longitud del anclaje, reduciendo al mínimo el estrés y proporcionando una inserción predecible en el hueso mediante la distribución de torsión a lo largo de toda el ancla esencial cuando se colocan varias anclas en un hueso duro.⁶


Biocompatibilidad probada

- El ancla está hecha con el polímero PEEK-OPTIMA[®], de Invivo[®] para una biocompatibilidad probada, fuerza y radiolucidez.

1-6. ITR-4700: Ancla de Sutura HEALICOIL prueba competitiva. Datos en el archivo, septiembre de 2011.

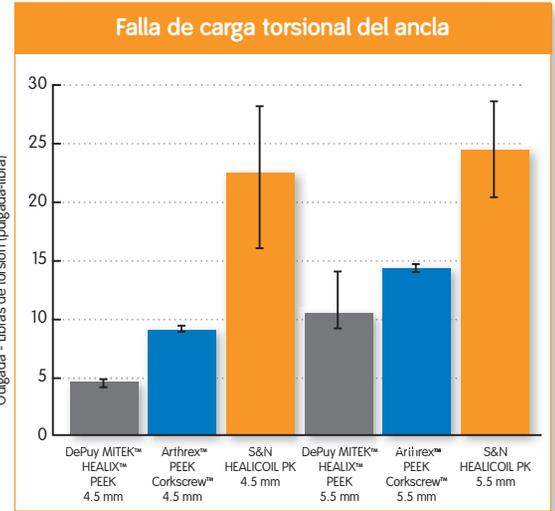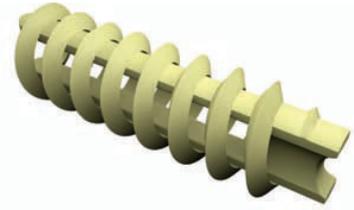

El Ancla HEALICOIL[®] PK mostró significativamente mayor resistencia a la falla de carga torsional durante la inserción que las anclas de la competencia, mostrada en la gráfica anterior.

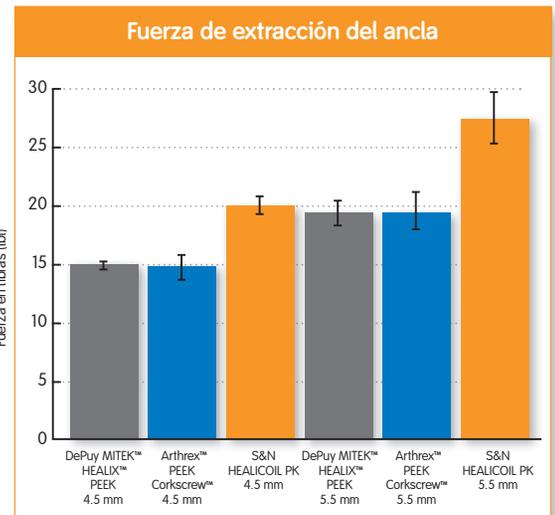

El Ancla HEALICOIL[®] PK, mostró significativamente mayor resistencia media de extracción en comparación con las anclas de la competencia que se muestran en la gráfica anterior.